

**ACCU-CHEK® Instant**



**Руководство пользователя**  
**Глюкометр**



**ACCU-CHEK®**

This file may not print or view at 100%.  
Die lines and color breaks do not print.  
“Holding Area” text, box and rules do  
not print.



Roche USA –54702  
V1/1 – 08014434001\_01 –  
Black





## Содержание

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                             | 3  |
| Глава 1. Ваша новая система .....                                          | 5  |
| Глава 2. Измерения уровня глюкозы крови .....                              | 11 |
| Глава 3. Контрольные измерения .....                                       | 19 |
| Глава 4. Просмотр ваших данных .....                                       | 25 |
| Глава 5. Беспроводная связь и сопряжение глюкометра .....                  | 27 |
| Глава 6. Подключение к ПК .....                                            | 31 |
| Глава 7. Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей ..... | 33 |
| Глава 8. Техническая информация .....                                      | 41 |
| Глава 9. Гарантия .....                                                    | 47 |
| Алфавитный указатель .....                                                 | 48 |

This file may not print or view at 100%.  
Die lines and color breaks do not print.  
“Holding Area” text, box and rules do not  
print.



Roche USA – 54702  
V2/1 – 08014434001\_01 –  
Black



Roche USA – 54702  
V2/2 – 08014434001\_01 –  
PMS 320



### Система Accu-Chek Instant (Акку-Чек Инстант)

Тест-полоски Accu-Chek Instant (Акку-Чек Инстант) в сочетании с глюкометром Акку-Чек Инстант предназначены для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови из пальца, ладони, предплечья или плеча в качестве дополнительного средства мониторинга эффективности гликемического контроля.

Тест-полоски Акку-Чек Инстант в сочетании с глюкометром Акку-Чек Инстант предназначены для диагностики *in vitro* в рамках самоконтроля пациентами, страдающими диабетом.

Тест-полоски Акку-Чек Инстант в сочетании с глюкометром Акку-Чек Инстант предназначены для диагностики *in vitro* врачами в лечебных учреждениях. Исследовать венозную, артериальную и неонатальную кровь может только лечащий врач.

Эта система не предназначена для диагностики сахарного диабета или для анализа образцов неонатальной пуповинной крови.

Возможно использовать для проведения самоконтроля

В систему входят:

Глюкометр Акку-Чек Инстант с батарейками, тест-полоски Акку-Чек Инстант\* и контрольные растворы Акку-Чек Инстант\*.

\*Некоторые элементы в комплект не входят. Их необходимо приобретать отдельно.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Содержит мелкие детали, способные вызвать приступ удушья при проглатывании. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет.
- Любой предмет, имеющий контакт с кровью человека, является потенциальным источником инфекции (смотрите Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition; CLSI document M29-A4, May 2014).

## **Введение**

## Глюкометр Accu-Chek Instant (Акку-Чек Инстант)



### 1. Кнопка глюкометра

Нажимайте, когда необходимо включить и выключить глюкометр, перейти к другому экрану или сделать выбор.

### 2. Дисплей

Отображает результаты, сообщения и результаты измерений, сохраненные в памяти.

### 3. Индикатор целевого диапазона

Показывает, каким является результат измерения уровня глюкозы крови: выше, в пределах или ниже предварительно установленного диапазона значений.

### 4. Порт Micro USB

Для передачи данных из глюкометра в компьютер (ПК).



Вид сзади

- 5. Крышка отсека для батареек**  
Откройте, чтобы заменить батарейки.



Вид снизу

- 6. Направляющая для тест-полоски**  
Место для установки тест-полоски в глюкометр.





(для примера)

Тест-  
полоска

**7. Тубус с тест-полосками\***

**8. Металлический конец**

Вставьте этот конец в глюкометр.

**9. Желтый край**

На него наносится капля крови или контрольный раствор.

**10. Флакон с контрольным раствором\***

**11. Батарейки**

**12. Кабель USB\***

Для подключения глюкометра к ПК.

\*Некоторые элементы в комплект не входят.  
Их необходимо приобретать отдельно.

## Использование кнопки глюкометра

У вашего нового глюкометра всего одна кнопка, но она многофункциональна. Чтобы включить глюкометр и увидеть результат последнего измерения уровня глюкозы крови, нажмите кнопку глюкометра один раз. Чтобы просмотреть средние значения результатов измерений уровня глюкозы крови за 7, 30 и 90 дней, продолжайте нажимать кнопку глюкометра.

Если необходимо нажать кнопку глюкометра, нажмите ее быстро и отпустите.

Если необходимо нажать и удерживать кнопку глюкометра, нажмите ее и удерживайте по меньшей мере в течение трех секунд.

## Дата и время

Чтобы глюкометр отображал дату и время или чтобы их изменить, подключите его к мобильному устройству или ПК, на котором установлено программное приложение для управления диабетом. Установите дату и время, следуя указаниям программного приложения для управления диабетом. Дата и время будут отображаться на дисплее глюкометра вместе с результатами измерений.

## Целевой диапазон

Проконсультируйтесь с лечащим врачом для определения вашего индивидуального диапазона концентраций глюкозы крови. Очень важно, чтобы Ваши результаты измерений оставались в пределах целевого диапазона.

Целевой диапазон устанавливается по умолчанию на уровне 3,9–8,9 ммоль/л (70–160 мг/дл). Целевой диапазон может быть установлен от нижнего предела 3,3–7,8 ммоль/л (60–140 мг/дл) до верхнего предела 5,0–16,6 ммоль/л (90–300 мг/дл).

Чтобы изменить целевой диапазон, подключите глюкометр к мобильному устройству или ПК, на котором установлено программное приложение для управления диабетом. Далее следуйте указаниям программного приложения для управления диабетом.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Эта функция не является заменой обучению вашим лечащим врачом тому, как избегать возникновения гипогликемии.

## Символы

| Символ | Описание                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Символ результата последнего измерения. Указывает, что вы просматриваете результат последнего измерения уровня глюкозы крови.                 |
|        | Символ среднего значения за 7 дней. Указывает, что вы просматриваете среднее значение результатов измерения уровня глюкозы крови за 7 дней.   |
|        | Символ среднего значения за 30 дней. Указывает, что вы просматриваете среднее значение результатов измерения уровня глюкозы крови за 30 дней. |
|        | Символ среднего значения за 90 дней. Указывает, что вы просматриваете среднее значение результатов измерения уровня глюкозы крови за 90 дней. |
|        | Символ в виде капли                                                                                                                           |
|        | Символ <i>Bluetooth</i> ®                                                                                                                     |
|        | Символ флакона с контрольным раствором                                                                                                        |
|        | Символ песочных часов                                                                                                                         |
|        | Символ низкого заряда батареи                                                                                                                 |
|        | Данных для отображения нет                                                                                                                    |
|        | Символ сопряжения                                                                                                                             |
|        | Стрелка-индикатор целевого диапазона. Мигает, когда результат измерения уровня глюкозы крови находится вне пределов целевого диапазона.       |
|        | Символ предупреждения о температуре                                                                                                           |
|        | Символ беспроводного подключения                                                                                                              |



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Результаты измерения уровня глюкозы крови могут отображаться как в mg/dL (мг/дл), так и в mmol/L (ммоль/л). Единицы измерения указаны на наклейке сзади глюкометра. Если глюкометр выводит результаты в неправильных единицах измерения, обратитесь в Информационный центр. Если вы не знаете, какая единица измерения является для вас правильной, обратитесь к лечащему врачу. Использование неправильных единиц измерения может привести к неправильной интерпретации вашего фактического уровня глюкозы крови, что может стать причиной неправильного лечения.



Выводимые здесь единицы измерения  
— mg/dL (мг/дл) или mmol/L (ммоль/л)

### Использование системы Акку-Чек Инстант

- Используйте только тест-полоски Акку-Чек Инстант.
- Используйте тест-полоску сразу же после извлечения ее из тубуса с тест-полосками.
- Не наносите на тест-полоску кровь или контрольный раствор, если тест-полоска еще не вставлена в глюкометр.
- Плотно закрывайте тубус с тест-полосками сразу же после извлечения из него тест-полоски, чтобы защитить тест-полоски от влаги.
- Храните неиспользованные тест-полоски в плотно закрытом оригинальном тубусе с тест-полосками.
- Проверьте срок годности, указанный на тубусе с тест-полосками. Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.
- Храните тубус с тест-полосками и глюкометр в прохладном сухом месте, например, в спальне.
- Более полная информация об условиях хранения тест-полосок и работы системы указана в инструкции-вкладыше тест-полосок.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не храните тест-полоски в жаркой и влажной среде (например, в ванной комнате или на кухне)! Высокая температура и влажность оказывают разрушающее воздействие на тест-полоски.

### Выполнение измерения уровня глюкозы крови из кончика пальца

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для проведения измерения уровня глюкозы крови вам понадобятся глюкометр, тест-полоска и устройство для прокалывания кожи с установленным ланцетом.
- Измерение уровня глюкозы крови невозможно выполнить, когда глюкометр подключен к ПК с помощью кабеля USB.

## Измерения уровня глюкозы крови | 2


1



Вымойте руки теплой водой с мылом и тщательно их высушите.

Подготовьте устройство для прокалывания кожи.

2

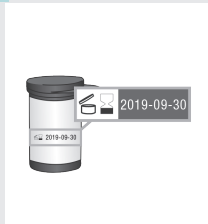

Проверьте срок годности, указанный на тубусе с тест-полосками.

Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.


3



Извлеките тест-полоску из тубуса с тест-полосками.


Плотно закройте крышку тубуса.

4

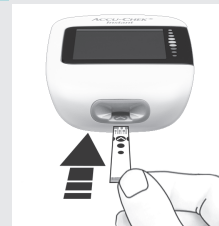

Вставьте металлический конец тест-полоски в глюкометр. Глюкометр включится.

5

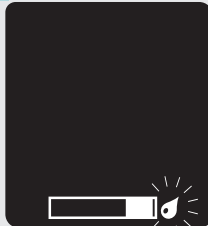


После появления мигающего символа в виде капли проколите подушечку пальца с помощью устройства для прокалывания кожи.

## 2


## Измерения уровня глюкозы крови

6

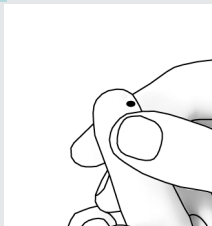

Слегка сдавите палец, чтобы активизировать кровоток. Это поможет получить каплю крови.


7

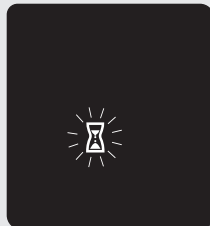

Прикоснитесь каплей крови к **желтому краю** тест-полоски. Уберите палец от тест-полоски при появлении мигающего символа песочных часов. Не наносите кровь на верхнюю часть тест-полоски.



8

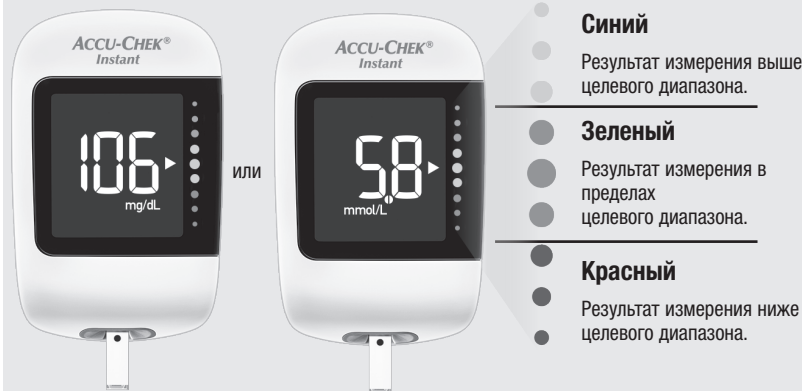

Результат теста отображается со стрелкой. Стрелка показывает, каким является результат измерения: выше, в пределах или ниже целевого диапазона.\* Зеленая зона индикатора целевого диапазона соответствует целевому диапазону. Если результат измерения вне этого диапазона, стрелка мигает.

Извлеките использованную тест-полоску из глюкометра и выбросьте ее.

\*Целевой диапазон устанавливается по умолчанию на уровне 3,9–8,9 ммоль/л (70–160 мг/дл). Чтобы изменить целевой диапазон, подключите глюкометр к мобильному устройству или ПК, на котором установлено программное приложение для управления диабетом. Изменение целевого диапазона необходимо предварительно обсудить с вашим лечащим врачом.

### Выполнение измерения уровня глюкозы в крови из ладони, предплечья или плеча (альтернативное место)

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте анализ крови из альтернативных мест (AST) для калибровки систем непрерывного мониторинга глюкозы или расчета дозировки инсулина.

Для анализа глюкозы крови могут использоваться образцы крови не только из кончика пальца, но и из других участков тела. Среди них — ладони, предплечья или плечи.

Кровь, полученная из кончика пальца и ладони, может быть использована для измерения глюкозы крови в любое время.

Тогда как кровь, полученная из предплечья или плеча не всегда дает адекватные результаты. Это связано с тем, что изменения уровня глюкозы крови в кончике пальца и в ладони происходят быстрее, чем в предплечье или плече. Следствием этих различий может стать неправильная интерпретация вашего фактического уровня глюкозы крови, что приведет к неправильному лечению и возможным неблагоприятным последствиям для здоровья.

Прочтите следующий раздел, прежде чем выполнять измерение в крови, взятой из предплечья или плеча.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выполнять анализ крови из предплечья или плеча можно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• непосредственно перед приемом пищи;</li> <li>• натощак.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Выполнять анализ крови из предплечья или плеча НЕЛЬЗЯ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в течение двух часов после еды, когда уровень глюкозы крови может быстро изменяться;</li> <li>• после введения болюсного инсулина, когда показатели уровня глюкозы крови могут быстро уменьшаться;</li> <li>• после физической нагрузки;</li> <li>• если вы нездоровы;</li> <li>• если вам кажется, что у вас очень низкий уровень глюкозы крови (гипогликемия);</li> <li>• если вы иногда не замечаете признаки низкого уровня глюкозы крови.</li> </ul> |

Если вы хотите использовать для забора крови альтернативные места, сначала поговорите об этом со своим лечащим врачом.

Получить насадку AST и подробные инструкции по вопросу анализа крови из альтернативных мест (AST) можно, обратившись в Информационный центр.

## Необычные результаты измерения уровня глюкозы крови

Если результат измерения уровня глюкозы крови не соответствует Вашему самочувствию, воспользуйтесь этим перечнем для решения возникшей проблемы.

| Поиск неисправностей                                                                    | Действия                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не истек ли у тест-полосок срок годности?                                               | Если у тест-полосок истек срок годности, вам следует их выбросить. Повторите измерение уровня глюкозы крови с тест-полоской, срок годности которой не истек.                     |
| Всегда ли плотно закрыта крышка тубуса с тест-полосками?                                | Если тубус с тест-полосками какое-то время оставался открытым, замените его на новый. Повторите измерение глюкозы крови.                                                         |
| Использовалась ли тест-полоска сразу же после извлечения ее из тубуса с тест-полосками? | Повторите измерение глюкозы крови с новой тест-полоской.                                                                                                                         |
| Хранятся ли тест-полоски в прохладном сухом месте?                                      | Повторите измерение уровня глюкозы крови, используя тест-полоски, хранившиеся надлежащим образом.                                                                                |
| Следовали ли вы указаниям?                                                              | Прочтите главу <b>Измерения уровня глюкозы крови</b> и повторите измерение уровня глюкозы крови. Если решить проблему по-прежнему не удастся, обратитесь в Информационный центр. |
| Правильно ли работают глюкометр и тест-полоски?                                         | Выполните контрольное измерение. Прочтите главу <b>Контрольные измерения</b> для получения инструкций.                                                                           |
| Вам по-прежнему не удается установить причину ошибки?                                   | Обратитесь в Информационный центр.                                                                                                                                               |

### Симптомы низкого или высокого уровня глюкозы крови

Осознание симптомов низкого или высокого уровня глюкозы крови способствует пониманию результатов измерений и принятию решений при появлении неожиданных результатов.

Низкий уровень глюкозы крови (гипогликемия): Симптомы гипогликемии среди прочего могут включать тревожность, дрожь, потливость, головную боль, повышенный аппетит, головокружение, бледность кожи, внезапную смену настроения или раздражительность, утомляемость, рассеянность внимания, неловкость, сердцебиения и/или спутанность сознания.

Высокий уровень глюкозы крови (гипергликемия): Симптомы гипергликемии среди прочего могут включать усиленную жажду, частые позывы к мочеиспусканию, нечеткое зрение, сонливость и/или необъяснимое похудение.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении любых указанных симптомов или других необычных симптомов проверьте уровень глюкозы крови из кончика пальца или ладони. Если на дисплее отобразится символ LO или HI, немедленно обратитесь к лечащему врачу.

### Когда необходимо выполнять контрольное измерение

Контрольные измерения необходимы для того, чтобы убедиться в правильной работе глюкометра и тест-полосок. Контрольные измерения следует выполнять в следующих случаях:

- при вскрытии новой упаковки тест-полосок;
- если тубус с тест-полосками оставался открытым;
- если вы думаете что тест-полоски повреждены;
- для проверки глюкометра и тест-полосок;
- если тест-полоски хранились при экстремальной температуре и/или влажности;
- если вы уронили глюкометр;
- если результат измерения не соответствует вашему самочувствию;
- если вы хотите проверить, правильно ли проводите измерение.

### Информация о контрольных растворах

- Используйте только контрольные растворы Акку-Чек Инстант.
- После использования контрольного раствора плотно закрывайте флакон.
- Нанесите дату вскрытия флакона с контрольным раствором на этикетку флакона. Контрольный раствор необходимо утилизировать сразу же при наступлении одного из следующих событий: через 3 месяца со дня вскрытия флакона с контрольным раствором (дата утилизации) либо по истечении срока годности, указанного на этикетке, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Не используйте контрольный раствор с истекшим сроком годности.
- Условия хранения контрольного раствора указаны в его инструкции-вкладыше.
- Глюкометр автоматически различает кровь и контрольный раствор.
- При попадании на ткань контрольный раствор может оставить пятна. Пятна можно отстирать водой с мылом.


# 3

## Контрольные измерения

### Процедура проведения контрольного измерения

Вам потребуются глюкометр, тест-полоска, контрольный раствор уровня 1 (Control 1) или 2 (Control 2).

1

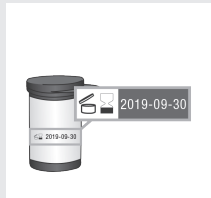

Проверьте срок годности, указанный на тубусе с тест-полосками. Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.

2



Извлеките тест-полоску из тубуса с тест-полосками.

Плотно закройте крышку тубуса.

3




Вставьте металлический конец тест-полоски в глюкометр. Глюкометр включится.




Появится мигающий символ в виде капли.

4

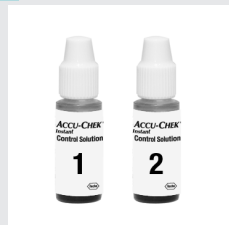

Выберите контрольный раствор для проведения измерения. Уровень выбранного раствора вы сможете ввести позже по ходу измерения.

5

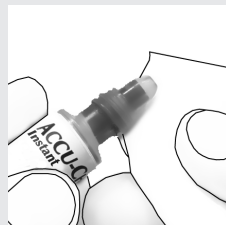

Снимите крышку флакона. Промокните кончик флакона салфеткой. Слегка надавите на флакон так, чтобы на кончике образовалась крошечная капля.

6



Прикоснитесь каплей к **желтому краю** тест-полоски. Не наносите контрольный раствор на верхнюю часть тест-полоски.




Когда контрольного раствора на тест-полоске достаточно, появится мигающий символ песочных часов.

### 3


## Контрольные измерения

7

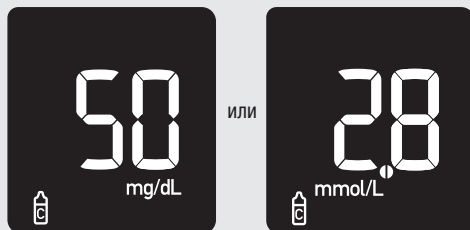

Появится результат контрольного измерения. Нажмите кнопку глюкометра.

8

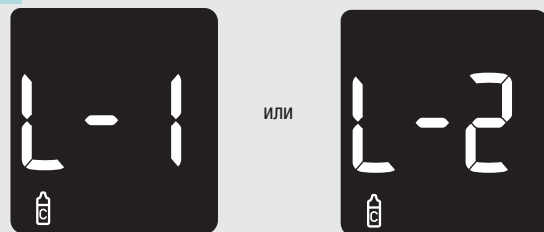

При измерении с контрольным раствором уровня 1 появится экран L-1. Нажмите и удерживайте кнопку глюкометра, чтобы подтвердить измерение с контрольным раствором уровня 1.

При измерении с контрольным раствором уровня 2 появится экран L-2. Нажмите и удерживайте кнопку глюкометра, чтобы подтвердить измерение с контрольным раствором уровня 2.

Для переключения между L-1 и L-2 нажмите кнопку глюкометра.



9




или



**OK** отобразится, если результат контрольного измерения находится в пределах диапазона.

**Err** отобразится, если результат контрольного измерения находится вне диапазона.

10

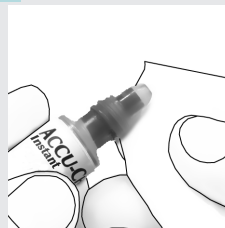

Промокните кончик флакона салфеткой. Плотнo закройте флакон.

Извлеките использованную тест-полоску из глюкометра и выбросьте ее.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если никакие дополнительные действия не будут выполняться, глюкометр выключится через 90 секунд после успешно выполненного измерения или через 15 секунд после извлечения тест-полоски.

## Что означают результаты контрольного измерения вне допустимого диапазона

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Диапазоны контрольных значений нанесены на этикетку тубуса с тест-полосками. Если результат контрольного измерения вне допустимого диапазона, воспользуйтесь этим перечнем для решения возникшей проблемы.

## 3

## Контрольные измерения

| Поиск неисправностей                                                                                         | Действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не истек ли срок годности тест-полосок или контрольного раствора?                                            | Если срок годности тест-полосок или контрольного раствора истек, необходимо их утилизировать. Если с момента вскрытия флакона с контрольным раствором прошло более трех месяцев, необходимо его утилизировать. Повторите контрольное измерение с тест-полоской и контрольным раствором, срок годности которых не истек. |
| Промокнули ли вы кончик флакона с контрольным раствором салфеткой перед использованием?                      | Промокните кончик флакона салфеткой. Повторите контрольное измерение с новой тест-полоской и свежей каплей контрольного раствора.                                                                                                                                                                                       |
| Плотно ли закрыты тубус с тест-полосками и флакон с контрольным раствором?                                   | Если тубус с тест-полосками или флакон контрольного раствора какое-то время оставались открытыми, замените их на новые. Повторите контрольное измерение.                                                                                                                                                                |
| Использовалась ли тест-полоска сразу же после извлечения ее из тубуса с тест-полосками?                      | Повторите контрольное измерение с новой тест-полоской и свежей каплей контрольного раствора.                                                                                                                                                                                                                            |
| Хранились ли тест-полоски и контрольные растворы в прохладном сухом месте?                                   | Повторите контрольное измерение, используя тест-полоски и контрольные растворы, хранившиеся надлежащим образом.                                                                                                                                                                                                         |
| Следовали ли вы указаниям?                                                                                   | Прочтите главу <b>Контрольные измерения</b> и повторите контрольное измерение.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Был ли выбран соответствующий уровень контрольного раствора (1 или 2) при проведении контрольного измерения? | Даже если вы ошиблись с уровнем контрольного раствора, вы, тем не менее, можете сопоставить полученный результат с диапазоном допустимых значений на тубусе с тест-полосками.                                                                                                                                           |
| Вам по-прежнему не удается установить причину ошибки?                                                        | Обратитесь в Информационный центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Обзор


- В памяти глюкометра автоматически сохраняются результаты по меньшей мере 720 измерений уровня глюкозы крови, но просмотреть на глюкометре можно только результат последнего измерения и средние значения измерений за 7, 30 и 90 дней. Для просмотра сохраненных результатов измерений уровня глюкозы крови их следует перенести в совместимое программное приложение.
- В памяти глюкометра автоматически сохраняются результаты по меньшей мере 30 контрольных измерений, но просмотреть на глюкометре можно только результат текущего измерения. Для просмотра сохраненных результатов контрольных измерений их следует перенести в совместимое программное приложение.
- Для расчета среднего значения уровня глюкозы крови за 90 дней используются результаты последних 720 измерений, даже если в течение этого периода их было выполнено больше.
- Для расчета средних значений уровня глюкозы крови за 7, 30 и 90 дней не используются результаты контрольных измерений.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не меняйте свое лечение на основании отдельного результата измерения уровня глюкозы крови в памяти глюкометра. Перед изменением лечения на основании результатов измерения из памяти глюкометра проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

## Просмотр результата последнего измерения уровня глюкозы крови

1

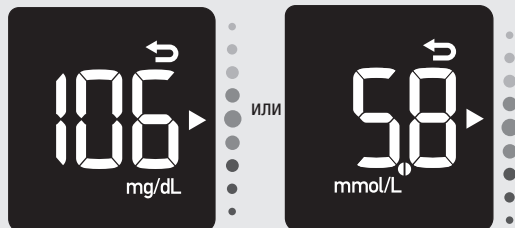


Если глюкометр выключен, нажмите кнопку глюкометра, чтобы включить его. Символ результата последнего измерения  указывает на то, что на экране отображается результат последнего измерения уровня глюкозы крови.

## 4 | Просмотр ваших данных

### Просмотр средних значений результатов измерений

На основе всех результатов измерений уровня глюкозы крови глюкометром за последние 7, 30 или 90 дней рассчитывается одно числовое значение для каждого периода. Это число называется средним значением и помогает оценить результаты измерений глюкозы крови, полученные в течение определенного периода времени.

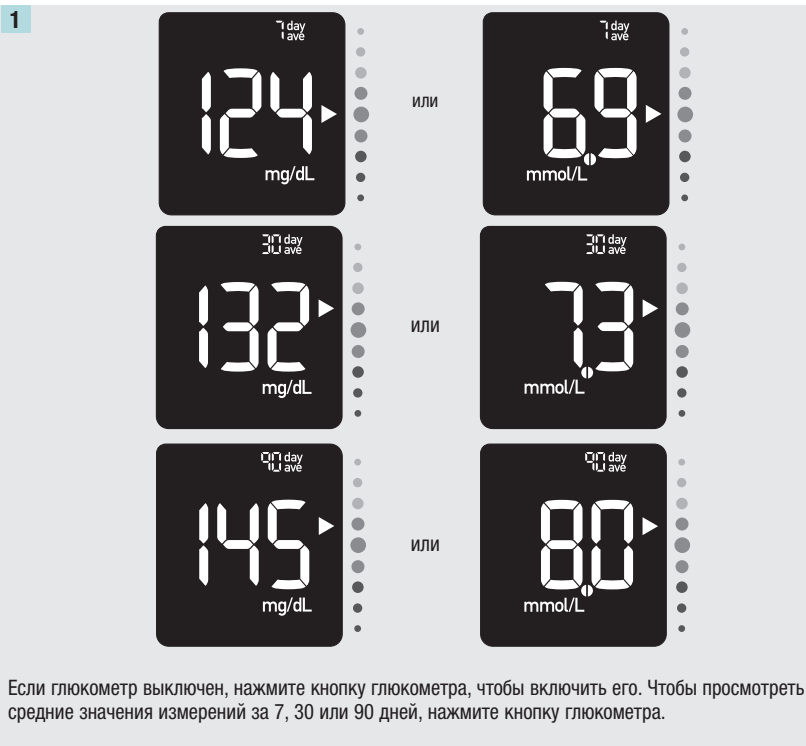

### Обзор

Процесс создания соединения между глюкометром и мобильным устройством называется сопряжением. Для этого на мобильном устройстве должно быть установлено приложение, которое может принимать данные глюкометра. С помощью этого приложения можно автоматически синхронизировать связанные с диабетом данные на глюкометре и мобильном устройстве по беспроводному соединению.

### Сопряжение

Глюкометр невозможно подключить более чем к 1 устройству одновременно. Попытка одновременного сопряжения со вторым устройством приведет к потере уже установленного сопряжения.

Глюкометр и сопрягаемое устройство должны находиться в пределах 1 метра друг от друга.


1

#### На мобильном устройстве

Откройте приложение и выберите **Подключить глюкометр**. При появлении запроса включите *Bluetooth*.

2

#### На глюкометре

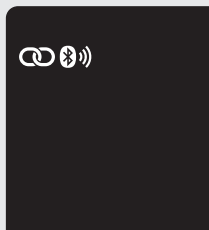

Не включая глюкометр, нажмите и удерживайте его кнопку, пока на дисплее не появится символ *Bluetooth*. На дисплее появятся и замигают символы сопряжения и беспроводного подключения.

3

#### На мобильном устройстве

В приложении выберите свой глюкометр из списка найденных устройств. После появления соответствующего запроса введите 6-значный PIN-код, указанный на тыльной стороне глюкометра.

## 5 | Беспроводная связь и сопряжение глюкометра

4

На глюкометре



При успешном сопряжении на дисплее появится надпись **OK**.  
Если выполнить сопряжение не удастся, на дисплее появится надпись **Err**.


### Беспроводная передача данных

Если модуль *Bluetooth* включен и глюкометр сопряжен с мобильным устройством, результаты измерения отправляются на сопряженное устройство автоматически.

### Выключение Bluetooth


Для отключения беспроводной связи данных (режим «В самолете») необходимо выключить *Bluetooth*. Выключение *Bluetooth* не приведет к потере сопряжения с глюкометром.

1

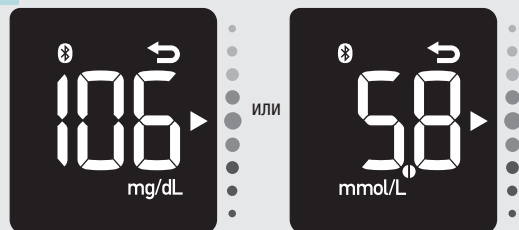

Если глюкометр выключен, нажмите кнопку глюкометра, чтобы включить его. Откроется экран с результатами последнего измерения.

2

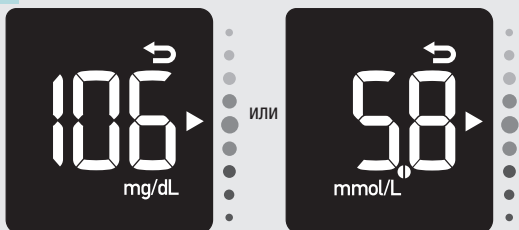

Нажмите и удерживайте кнопку глюкометра, пока символ *Bluetooth* не исчезнет.

## 5 | Беспроводная связь и сопряжение глюкометра

### Включение Bluetooth

Если модуль *Bluetooth* был выключен, его можно включить с помощью описанных ниже действий. Беспроводная связь между глюкометром и мобильным устройством снова будет доступна.





### Подключение глюкометра к ПК с помощью кабеля USB


Чтобы получить доступ к установленному на ПК программному приложению для управления диабетом, следуйте нижеприведенными шагами. Это программное приложение можно использовать для просмотра сохраненных результатов исследований, установки даты и времени, а также для изменения целевого диапазона.

1



Подключите меньший конец кабеля USB к глюкометру.

2

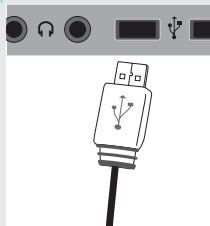

Вставьте больший конец кабеля USB в порт USB ПК.  
Если глюкометр был выключен, он включится.

3

Запустите программное приложение для управления диабетом и начните передачу данных.

4



Данные передаются из глюкометра в программное приложение.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Кабель USB не используется для зарядки батареек глюкометра. После завершения передачи данных отключите кабель USB.




## Техобслуживание глюкометра

При каждом включении глюкометр автоматически выполняет самотестирование и при обнаружении сбоев или неисправностей выдает соответствующие сообщения. См. раздел **Сообщения об ошибках** этой главы.

Если вы уронили глюкометр или же сомневаетесь в точности результатов, обратитесь в Информационный центр.


## Замена батареек

**1**

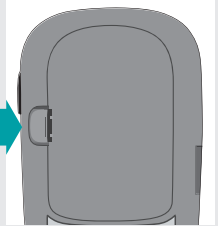


Откройте крышку отсека для батареек на задней части глюкометра нажатием на защелку в направлении, указанном стрелкой, и потягиванием крышки вверх.

**2**

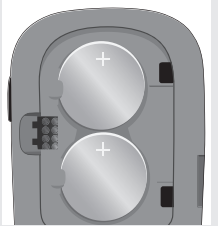

Извлеките старые батарейки. Нажмите и удерживайте кнопку глюкометра не менее 2 секунд.

**3**

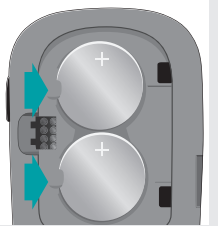


Вставьте новые батарейки под держатели **плюсом (+) вверх**. Установите крышку отсека для батареек на место и защелкните.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Глюкометр работает от двух плоских круглых литиевых батареек (3 В, тип CR2032). Это обычные батарейки, которые можно приобрести в большинстве магазинов. Рекомендуется заранее приобрести запасные батарейки и держать их наготове.
- Всегда используйте батарейки одного производителя и заменяйте их одновременно.
- При замене батареек данные глюкометра не теряются.


## Проверка дисплея глюкометра

1

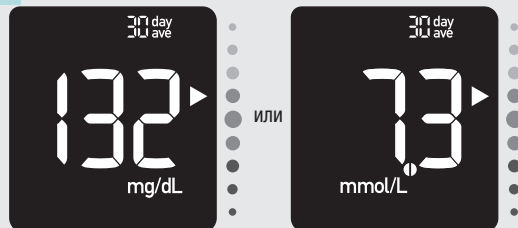

Если глюкометр выключен, нажмите кнопку глюкометра, чтобы включить его. Чтобы вывести на экран среднее значение определений уровня глюкозы крови за 30 дней, нажмите кнопку глюкометра дважды.

2

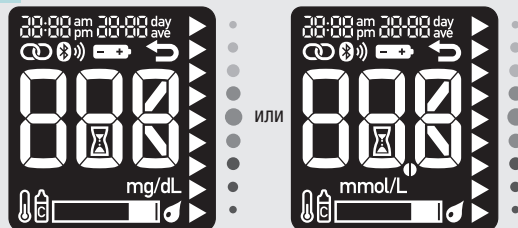

Нажмите и удерживайте кнопку глюкометра, пока не появятся все сегменты дисплея. Проверьте наличие всех сегментов на дисплее глюкометра. Вид всех сегментов должен соответствовать вышеприведенному рисунку. Недостающие сегменты могут означать проблемы с глюкометром, обратитесь в Информационный центр.

### Чистка глюкометра

Защищайте глюкометр от пыли. Если необходимо почистить или продезинфицировать глюкометр, обязательно соблюдайте указания, перечисленные ниже — они помогут обеспечить оптимальную работоспособность глюкометра.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте попадания жидкостей внутрь любого отверстия глюкометра.
- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на глюкометр.
- Не погружайте глюкометр в жидкость.

1

Убедитесь в том, что глюкометр выключен.

2

Осторожно протрите поверхность глюкометра мягкой салфеткой, смоченной одним из следующих детергентов (удалите лишнюю жидкость, тщательно отжав ткань):

- 70 % изопропиловый спирт
- Мягкодействующая жидкость для мытья посуды, разбавленная водой
- 10 % раствор бытового отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды), приготовленный в день применения

## Сообщения об ошибках

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Категорически запрещается принимать терапевтические решения, руководствуясь сообщением об ошибке глюкометра.
- Если у вас возникли проблемы или вы видите какие-то еще сообщения об ошибке, обратитесь в Информационный центр.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При всех кодированных сообщениях об ошибках на дисплее чередуются код ошибки (от E-1 до E 14) и **Err**.



Глюкометр не включается или дисплей пуст.

- Батарейки полностью разряжены.

Вставьте новые батарейки.

- Дисплей поврежден. / Глюкометр неисправен.

Обратитесь в Информационный центр.

- Экстремальная температура.

Перенесите глюкометр в место с более умеренной температурой.



Глюкометр подключен к ПК; измерение уровня глюкозы крови или контрольное измерение выполнить невозможно.

Отключите кабель USB и выполните измерение уровня глюкозы крови или контрольное измерение ЛИБО извлеките тест-полоску и начните передачу данных.



Попытка сопряжения глюкометра с мобильным устройством не удалась.

Повторите сопряжение.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Тест-полоска повреждена, неправильно вставлена или уже использовалась.

Извлеките тест-полоску и вставьте еще раз или замените ее другой при повреждении или повторном использовании.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Возникла ошибка глюкометра или тест-полоски.

Повторите измерение глюкозы крови. При повторном уведомлении об ошибке E-3 выполните контрольное измерение с использованием контрольного раствора и новой тест-полоски.

- Если результат контрольного измерения находится в допустимых пределах, повторно прочтите инструкцию по правильному проведению измерения и повторите измерение уровня глюкозы крови с новой тест-полоской.
- Если результат контрольного измерения находится вне допустимого диапазона, см. раздел **Что означают результаты контрольного измерения вне допустимого диапазона** главы **Контрольные измерения**.

В редких случаях код неисправности E-3 может свидетельствовать об экстремально высоком уровне глюкозы крови за пределами диапазона измерений системы. Если ваше самочувствие не свидетельствует об экстремально высоком уровне глюкозы крови, повторите измерение. См. раздел **Необычные результаты измерения уровня глюкозы крови** главы **Измерения уровня глюкозы крови**. Если код E-3 продолжает появляться для выполняемых измерений уровня глюкозы, **немедленно обратитесь к вашему лечащему врачу.**



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

На тест-полоску нанесено недостаточное количество крови или контрольного раствора для выполнения измерения или же кровь или контрольный раствор были нанесены уже после начала измерения.

Извлеките тест-полоску и повторите измерение уровня глюкозы крови либо контрольное измерение.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Кровь или контрольный раствор были нанесены на тест-полоску до появления на дисплее мигающего символа капли.

Извлеките тест-полоску и повторите измерение уровня глюкозы крови либо контрольное измерение.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Произошла ошибка электроники.

Извлеките батарейки, нажмите и удерживайте кнопку глюкометра не менее 2 секунд, затем установите батарейки обратно. Выполните измерение уровня глюкозы крови или контрольное измерение.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Температура выходит за диапазон рабочих температур системы.

Условия работы системы указаны в инструкции-вкладыше к тест-полоскам. Повторите измерение уровня глюкозы крови или контрольное измерение в месте с приемлемыми условиями. Не подвергайте глюкометр принудительному нагреву или охлаждению.





(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Батарейки почти разряжены.

Немедленно замените батарейки. Если сообщение об ошибке появляется и после замены батареек, снова извлеките их, нажмите и удерживайте кнопку глюкометра не менее 2 секунд, затем установите батарейки обратно.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Возможно, необходимо перенастроить внутренние часы глюкометра.

Нажмите кнопку глюкометра. Если дата и время установлены, переустановите их. См. раздел **Дата и время** главы **Ваша новая система**.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Возможно, повреждена тест-полоска.

Повторите измерение уровня глюкозы крови или контрольное измерение с новой тест-полоской.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Возможно, в образце крови высокое содержание аскорбата.

Обратитесь к вашему лечащему врачу.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Возможно, направляющая для тест-полоски загрязнилась или в нее попала жидкость.

Извлеките тест-полоску и вставьте снова либо повторите измерение уровня глюкозы крови или контрольное измерение с новой тест-полоской. Если ошибка не устранена, обратитесь в Информационный центр.



(На дисплее поочередно появляются код ошибки и **Err.**)

Произошла ошибка электроники.

Обратитесь в Информационный центр.



Возможно, уровень глюкозы крови превышает диапазон измерений системы.

См. раздел **Необычные результаты измерения уровня глюкозы крови** главы **Измерения уровня глюкозы крови.**



Возможно, уровень глюкозы крови ниже диапазона измерений системы.

См. раздел **Необычные результаты измерения уровня глюкозы крови** главы **Измерения уровня глюкозы крови.**

## Ограничения по использованию продукта

Внимательно ознакомьтесь с актуальной информацией о технических характеристиках и ограничениях использования в инструкции-вкладыше в упаковке с тест-полосками или с контрольным раствором.

| Технические характеристики                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем капли крови<br>Тип образца<br>Время измерения<br>Диапазон измерений<br>Условия хранения тест-полосок<br>Условия работы системы | Смотрите инструкцию-вкладыш к тест-полоскам.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Условия хранения глюкометра                                                                                                          | Температура: от –25 до 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Объем памяти                                                                                                                         | Результат одного измерения уровня глюкозы крови и средние значения измерений за последние 7, 30 и 90 дней (кроме того, сохраняются результаты по меньшей мере 720 измерений уровня глюкозы крови и 30 результатов контрольных измерений, их можно просмотреть с помощью сторонних приложений). |
| Автоматическое отключение                                                                                                            | Через 90 секунд после измерения, 15 секунд после извлечения тест-полоски или 5 секунд после выведения результата исследования на экран.                                                                                                                                                        |
| Источник питания                                                                                                                     | Две плоские круглые литиевые батарейки (3 В, тип CR2032)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дисплей                                                                                                                              | ЖК-дисплей                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры                                                                                                                              | 77,1 × 48,6 × 15,3 мм (ДШВ)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вес                                                                                                                                  | Прибл. 40 г (с батарейками)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Формат                                                                                                                               | Портативный, наладонный прибор                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Степень защиты                                                                                                                       | III                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Технические характеристики                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип глюкометра                                                                                          | Глюкометр Акку-Чек Инстант пригоден для работы в непрерывном режиме.                                                                                                    |
| Условия хранения контрольного раствора                                                                  | Смотрите инструкцию-вкладыш к контрольному раствору.                                                                                                                    |
|  Устройства интерфейса | Порт Micro USB типа B; технология Bluetooth с низким энергопотреблением, Continua Certified® для подключения к диспетчеру сертификации по программе Continua Certified. |
| Радиочастота подключения                                                                                | Технология Bluetooth с низким энергопотреблением использует полосу частот от 2402 до 2480 МГц с максимальной мощностью 0 дБм (1 мВт).                                   |

**Электромагнитная совместимость:** глюкометр удовлетворяет требованиям защиты от электромагнитного излучения в соответствии со стандартом EN 61326-2-6. Соответственно, глюкометр характеризуется низким уровнем электромагнитного излучения. Вероятность помех отрицательно влияющих на работу других электроприборов, мала.

**Анализ эксплуатационных характеристик:** см. инструкцию-вкладыш к тест-полоскам.

**Принципы измерения:** см. инструкцию-вкладыш к тест-полоскам.

**Заявление о соответствии:** Настоящим компания Рош заявляет, что глюкометр Акку-Чек Инстант соответствует основным требованиям и другим соответствующим правилам Европейских Директив ЕС 1999/5/ЕС и 2014/53/EU исключительно в рамках их действия. Переходный период для Директивы ЕС 1999/5/ЕС заканчивается 12 июня 2017 года. Действующее в настоящее время заявление о соответствии можно найти в Интернете по адресу <http://declarations.accu-chek.com>.

**Протокол обмена данными:** глюкометр Акку-Чек Инстант сертифицирован по программе Continua. Сертификация Continua означает, что данное изделие соответствует применимым стандартам IEEE 11073-10417 и было испытано и сертифицировано в соответствии с Руководством по проектированию Continua в редакции 2015 г., включая спецификации Bluetooth для мониторинга глюкозы крови, *Bluetooth SIG, Glucose Profile, Version 1.0* и *Bluetooth SIG, Glucose Service, Version 1.0*.

## Информация о безопасности изделия

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Мощные электромагнитные поля могут создавать помехи, отрицательно влияющие на работу глюкометра. Не используйте глюкометр вблизи источников сильного электромагнитного излучения.
- Для предотвращения электростатических разрядов не пользуйтесь глюкометром в очень сухой среде, особенно в присутствии синтетических материалов.

## Утилизация глюкометра

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В процессе измерения уровня глюкозы крови кровь может попасть на поверхность глюкометра или в сам глюкометр. Поэтому при пользовании глюкометрами, бывшими в употреблении, может появиться опасность распространения инфекции. Перед утилизацией глюкометра извлеките из него батарейку или батарейки. Утилизируйте глюкометры, бывшие в употреблении, следуя имеющимся у вас предписаниям. Информацию по правильной утилизации глюкометра вы можете получить в соответствующем ведомстве по месту жительства.
- Этот глюкометр не подпадает под действие Европейской директивы 2012/19/EU – Директива по отработавшим электрическим и электронным приборам WEEE.
- Утилизируйте использованные батарейки согласно требованиям действующего законодательства по охране окружающей среды.

## Условия транспортирования


Перед отправкой с завода изделие проходит контрольные проверки. Международные символы на упаковке и специальные инструкции по обращению указывают транспортировщику, как следует обращаться с изделием. При наличии любых следов неправильного обращения или повреждения немедленно обратитесь в отдел обслуживания клиентов уполномоченного представителя производителя или к региональному поставщику.

Транспортировать в соответствии с правилами хранения.

## 8 | Техническая информация

### Расшифровка символов

На упаковке, табличке с техническими данными и в инструкциях к глюкометру Акку-Чек Инстант могут использоваться следующие условные обозначения.
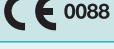
|                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Смотрите инструкцию по использованию                                                                                    |
|    | Биологические риски – Использованные глюкометры могут представлять собой потенциальный источник инфекций.               |
|    | Предостережение: соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в инструкции по использованию этого продукта. |
|    | Ограничение температуры (хранить при)                                                                                   |
|    | Производитель                                                                                                           |
|    | Каталожный номер                                                                                                        |
|    | Для in vitro диагностики                                                                                                |
|    | Международный торговый идентификационный номер                                                                          |
|    | Серийный номер                                                                                                          |
|   | Данный продукт отвечает требованиям Европейской Директивы 98/79/ЕС по медицинским устройствам для in vitro диагностики. |
|  | Плоская круглая батарейка (3 В, тип CR2032)                                                                             |

## Дополнительные расходные материалы

**Тест-полоски:** Тест-полоски Акку-Чек Инстант.

**Контрольные растворы:** Контрольные растворы Акку-Чек Инстант.

## Информация для лечащего врача

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация для лечащего врача: соблюдайте соответствующие нормы и правила, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Более полная информация для лечащего врача указана в инструкции-вкладыше к тест-полоскам.

## Обращение с пробами

При обращении с изделиями, загрязненными кровью, всегда носите перчатки. Всегда придерживайтесь общепринятых правил по обращению с предметами, которые могут быть загрязнены биологическим материалом человека. Придерживайтесь правил гигиены и мер предосторожности, установленных в вашей лаборатории или учреждении. Обработайте выбранное место взятия крови в соответствии с правилами учреждения.

Более полная информация о допустимых типах проб, антикоагулянтах и указания по обращению указаны в инструкции-вкладыше к тест-полоскам.

## Рекомендации пациентам по анализу крови из альтернативных мест

При принятии решений о допустимости анализа крови из альтернативных мест (AST) следует учитывать степень мотивации и обученности пациента наряду с его способностью оценивать информацию, связанную с диабетом и AST. При взвешивании целесообразности AST для ваших пациентов необходимо учитывать, что результаты измерения глюкозы в крови из кончика пальца или ладони и результаты измерения глюкозы в крови, полученной из предплечья или плеча, могут существенно расходиться. Различия в капиллярном русле и в общем кровотоке в теле могут вызывать несоответствие результатов измерений глюкозы крови в зависимости от того, из какого места берется кровь. Эти физиологические эффекты зависят от организма пациента и могут варьировать у одного и того же пациента в соответствии с его поведением и физическим состоянием.

Результаты наших исследований анализа крови из альтернативных мест у взрослых больных диабетом свидетельствуют о том, что уровни глюкозы в крови из кончика пальца или ладони в большинстве случаев изменяются быстрее, чем в крови, полученной из предплечья или плеча. Это особенно важно, если уровень глюкозы крови резко изменяется (повышается или понижается). Если ваш пациент привык принимать терапевтические решения на основе результатов измерений глюкозы крови из кончика пальца или ладони, то ему следует делать поправку на соответствующую задержку или более медленную скорость изменения уровня при анализе результатов уровня глюкозы крови, полученной из предплечья или плеча.

### **Упаковка**

Изделие упаковано в картонную коробку. В упаковку вложена инструкция.

Специальная транспортировочная упаковка и амортизирующий контейнер обеспечивают достаточную защиту от механических, климатических воздействий при условии соблюдения правил транспортировки.

### **Маркировка**

Маркировка потребительской упаковки содержит следующую информацию:

- Наименование изделия
- Наименование, адрес производителя
- Страна происхождения
- Каталожный номер
- Серийный номер
- Срок годности (использовать до)
- Количество изделий в упаковке
- Условия хранения (температура)
- Указание на использование «для ин витро диагностики»
- Указание на возможность использования для проведения самоконтроля
- Знак CE-маркировки
- Наименование и адрес уполномоченной организации, импортера
- Номер регистрационного удостоверения



### Гарантия

Позвольте продавцу заполнить гарантийный талон. Храните гарантийный талон.

Настоящие условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. Срок службы прибора, установленный производителем, составляет 5 лет. В соответствии с п. 7 ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» (продавец) устанавливает гарантийный срок на весь срок службы прибора, за исключением аккумуляторных батареек и аксессуаров к прибору. Не используйте прибор по истечении срока службы.

Гарантия продавца не распространяется на недостатки прибора, возникшие в результате небрежного обращения, применения прибора не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия параметров питающих и кабельных сетей государственным стандартам, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и иных посторонних веществ, существ и предметов.

### Правила предоставления рекламаций

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам, которые не являлись предметом приемки товара, произведенной в соответствии с условиями договора. По всем вопросам, связанным с обслуживанием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя. В случае рекламации обратиться к производителю и/или Уполномоченному представителю производителя.

## Алфавитный указатель

### А

анализ крови из альтернативных мест (AST) 16, 45

### Б

батарейки, замена 33

беспроводная связь

обзор 27

включение 30

выключение 29

передача данных 28

режим полета 29

сопряжение 27

### В

высокий уровень глюкозы крови 18

### Г

гарантия 47

гипергликемия 18

гипогликемия 18

глюкометр, очистка 35

### Д

дата и время 8

### И

измерение уровня глюкозы крови, выполнение 12

индикатор целевого диапазона 5, 15

информация для лечащего врача 45

информация о безопасности изделия 43

### К

кнопка, функции 5, 8

контрольное измерение, выполнение 20

контрольный раствор 19

### Н

низкий уровень глюкозы крови 18

### О

ограничения по использованию продукта 41

### П

передача данных

USB 31

беспроводная связь 28

### Р

расходные материалы 7, 45

результат последнего измерения 25

результаты измерения уровня глюкозы крови,  
необычные 17

результаты контрольных измерений, вне допустимого  
диапазона 23

### С

символы

IVD (для диагностики in vitro) 44

дисплей глюкометра 9

сообщения об ошибках 36

средние значения 9, 26

срок годности 12, 19

### Т

тест-полоски 12

техническая информация 41

технические характеристики 41

техобслуживание, глюкометр 33

тип батарейки 33, 41

### Ц

целевой диапазон 8, 15

**Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации  
(уполномоченная организация)\*\*, импортер**

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт  
[www.accu-check.com](http://www.accu-check.com) или обратитесь в Информационный центр.

Россия

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации  
(уполномоченная организация)\*\*, импортер:

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Юридический адрес: 107031, Россия, Москва, Трубная площадь, д. 2,  
помещение I, комната 42 Б

Почтовый адрес: 115114, Россия, Москва, Летниковская улица, д. 2, стр. 2

Тел.: 8 (495) 229-69-95

Информационный центр:

8-800-200-88-99 (бесплатно для всех регионов России),

адрес эл. почты: [info@accu-check.ru](mailto:info@accu-check.ru)

Веб-сайт: [www.accu-check.ru](http://www.accu-check.ru)

**\*\*Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации  
(уполномоченная организация) — это организация, уполномоченная производителем  
(изготовителем) производить ремонт, техническое обслуживание и принимать рекламации  
(претензии) от покупателей на территории Российской Федерации.**

ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ: 2016-10

# Приложение для управления диабетом Ассу-Чек Connect (Акку-Чек Коннект)\* можно бесплатно скачать в следующих магазинах приложений:



\*Доступно не для всех мобильных устройств. Доступно не во всех странах.

 Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK INSTANT и АККУ-ЧЕК – товарные знаки фирмы Roche.



CONTINUA, логотипы CONTINUA и CONTINUA CERTIFIED – товарные знаки, знаки обслуживания или знаки качества Continua Health Alliance. CONTINUA зарегистрирована как товарный знак в некоторых, но не во всех, странах продаж.

Bluetooth® текстовый символ и логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков фирмой Roche осуществляется по лицензии.

APPLE, логотип APPLE и APP STORE являются товарными знаками компании Apple Inc.

GOOGLE PLAY является товарным знаком компании Google Inc.

Все остальные товарные знаки и фирменные наименования являются собственностью их владельцев.

© 2017 Roche Diabetes Care  
08014434001(01)-0217